


[→ Webové stránky produktu](#)

Software pro zdravotníky

Software pro kalibraci a řízení

Software pro správu kvality RadiCS LE slouží ke kalibraci monitorů EIZO RadiForce a ke správě kalibračních dat. Kromě toho může RadiCS LE pomoci i při zjišťování a zpracování údajů o obrazovce – např. inventárního čísla či provozních hodin. Součástí RadiCS LE je rovněž funkce pro šetření podsvícení. To uživateli umožňuje šetřit energii i provozní hodiny v době, kdy se monitor nepoužívá. V RadiCS LE naleznete navíc i funkci Mouse Warp. Ta zabraňuje uvíznutí kurzoru myši na rozhraní obrazovek ve víceobrazovkových systémech pracujících s různým rozlišením. Software RadiCS LE se dodává společně s monitory EIZO RadiForce.

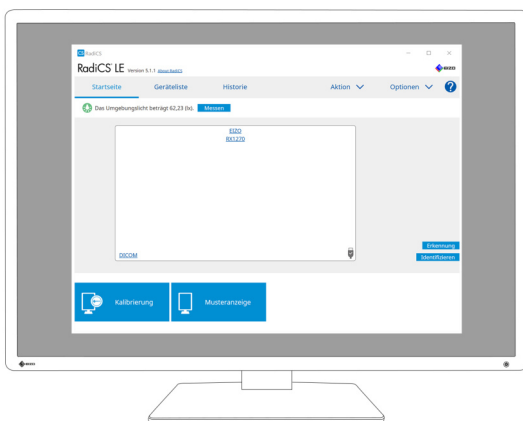

RadiCS nabízí tyto funkce:

- Kalibrace tónové charakteristiky DICOM
- Archivace kalibračních protokolů
- Backlight Saver pro úsporu energie a delší životnost
- Sledování vnitřních snímačů ovládaní jasu a tónových charakteristik

Technické údaje

KOMPATIBILNÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2
Mac	OS X Yosemite (10.10) / OS X El Capitan (10.11)

OBECNÉ INFORMACE/PROVOZ

Zobrazovací režimy	DICOM Part 14 GSDF, CIE, exponenciální (hodnota gama), log-lineární, lineární, uživatelský
Rozhraní	USB, RS232C, DDC
Jazyky	čínština, němčina, angličtina, japonština, francouzský

PODPOROVANÉ MONITORY

Všechny [RadiForce Modelle](#)

Vyhledejte kontakt na společnost EIZO:
EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích nebo jejich příslušných společností. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo. Všechna práva, chyby a změny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 28.04.2024