


[→ Site web du produit](#)

Software pour les professionnels de la santé

Logiciel de gestion et d'étalonnage

Le logiciel RadiCS LE sert à calibrer les moniteurs EIZO RadiForce et à gérer les données de calibrage. En outre, RadiCS LE aide à déterminer et à gérer les données d'écran, comme par exemple les numéros d'inventaire et les heures de fonctionnement. Une fonction Backlight Saver est intégrée dans RadiCS LE. Elle permet à l'utilisateur d'économiser à la fois de l'énergie et des heures de fonctionnement lorsque l'écran n'est pas utilisé. RadiCS LE propose en outre la fonction Mouse Warp. Elle évite que le curseur de la souris ne reste bloqué sur les bords de l'écran dans les systèmes multi-écrans lorsque les écrans fonctionnent avec des résolutions différentes. RadiCS LE est livré avec les moniteurs RadiForce d'EIZO.

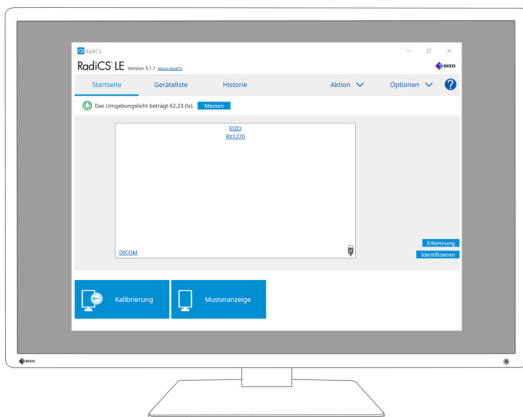

C'est ce que RadiCS LE fait pour vous:

- Calibrage DICOM de la caractéristique de la valeur tonale
- Archivage des journaux d'étalonnage
- Economiseur de rétroéclairage pour une consommation d'énergie réduite et une durée d'utilisation prolongée
- Surveillance du capteur interne du moniteur pour le contrôle de la luminosité et des caractéristiques de tonalité

Données techniques

SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2
Mac	OS X Yosemite (10.10) / OS X El Capitan (10.11)

GÉNÉRALITÉS/UTILISATION

Fonctions d'affichage	DICOM Part 14 GSDF, CIE, exponentiel (Gammawert), loglinear, linear, benutzerDICOM Part 14 GSDF, CIE, exponentiel (Gammawert), loglinear, linear, benutzerdefiniert
Interfaces	USB, RS232C, DDC
Langues	chinois, allemand, anglais, japonais, français

MONITEURS SUPPORTÉS

Tous les [RadiForce Modelle](#)

Trouvez votre interlocuteur EIZO:
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Téléphone: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays ou de leurs sociétés respectives. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne. Tous droits, erreurs et modifications réservés. Dernière mise à jour: 06.05.2024